

## Verkorte handleiding Resmed AutoSet, CS-A, ASV (adaptive servo-ventilator)


Het apparaat werkt op stroom, zonder stroom is therapie niet mogelijk.



Installatie van het systeem

1. Steek de stekker van de voedingseenheid aan op de achterkant van het apparaat.
2. Sluit het elektriciteitsnoer op de voedingseenheid aan.
3. Steek het andere uiteinde van het elektriciteitsnoer in een stopcontact.
4. Bevestig een uiteinde van de luchtslang aan op de luchtuitlaat.
5. Sluit het maskersysteem op het vrije uiteinde van de luchtslang aan.
6. Plaats het masker op uw gezicht.
7. Druk kort op de aan/uit knop om de therapie te starten.

**B**

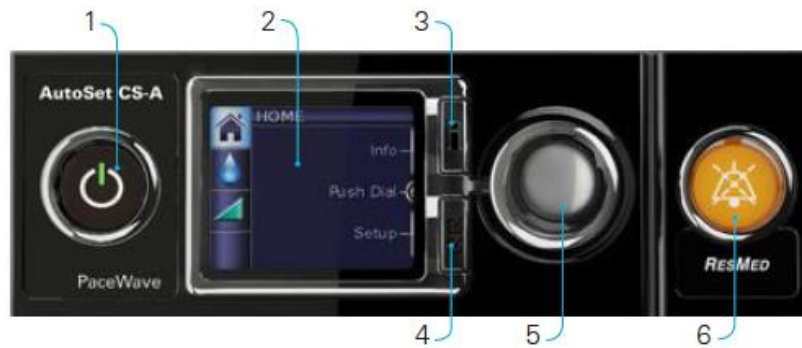

1. Start / stop knop
2. LCD scherm
3. Push Dial
4. Info
5. Setup
6. Knop voor Alarm onderdrukken, als u hier eenmaal op drukt wordt het alarm onderdrukt.

### Filter

Controleer het luchtfilter maandelijks op eventuele gaten of verstoppingen door vuil of stof. Vervang het luchtfilter zo nodig.

### Alarmen:

Het toestel kan om diverse redenen alarmen geven.

Om het geluid van het alarm te onderdrukken drukt u op de alarmknop.

Het geluid wordt nu 2 minuten onderdrukt.

Het alarm verdwijnt pas echt als het probleem opgelost is.

Tegelijkertijd met het alarm wordt in het display aangegeven waarom het toestel alarmeert.

Voor de betekenis van de tekens in het display zie de bijlage **“Alarmen”**.

Probeer het probleem op te lossen.

Indien het probleem is opgelost verdwijnt het alarm.

Indien u het probleem niet opgelost krijgt kunt u contact opnemen met het Centrum voor Thuisbeademing Rotterdam.

Meest voorkomende alarmen:

Op LCD scherm

Oplossen

Systeemstoring	Neem contact op met het centrum voor thuisbeademing.
Lekkage	Ergens in het circuit is lekkage. Het apparaat verliest te veel lucht. Loop systeem na en sluit het gehele systeem weer juist aan.  <i>Meestal lekkage doordat masker niet goed is aangesloten.</i>
Geen weergave	Controleer de elektrische aansluitingen en druk deze goed aan. Controleer werking van het stopcontact.

***Let op: raadpleeg altijd de originele handleiding voor meer opties!***