
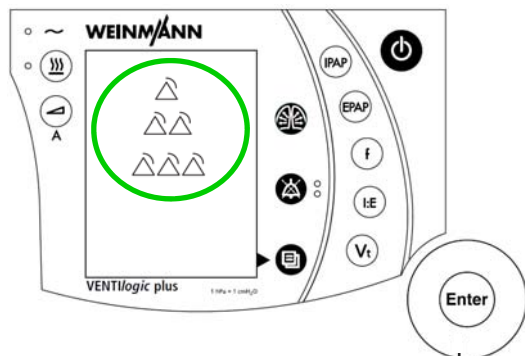
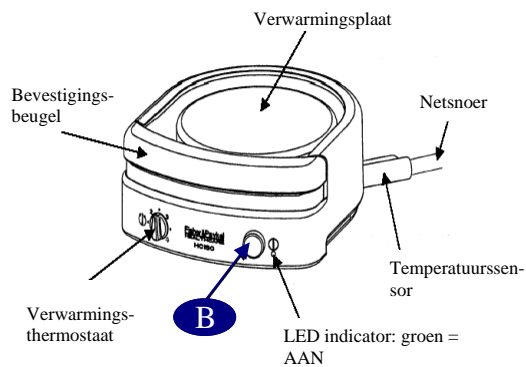


INSTRUCTIEKAART

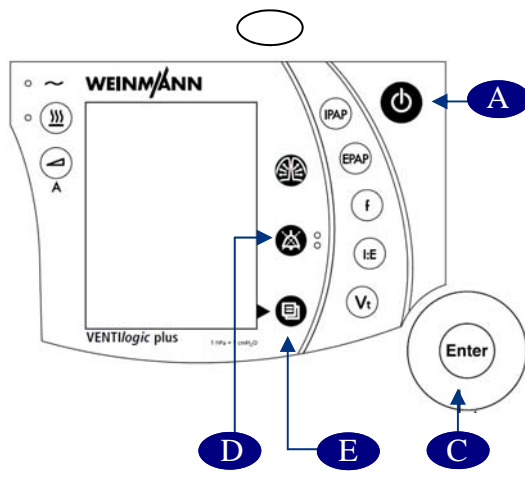

Starten en stoppen beademing

Starten beademing:

- druk kort op knop (A). Het toestel zal in enkele seconden starten. Er volgt een akoestisch alarm.
- Indien de inschakelautoomaat geactiveerd is zal het toestel starten indien u een ademdeug neemt in het masker. Dit kan alleen geactiveerd worden indien uw apparaat in de stand-by modus staat. Door op knop (E) te drukken komt u in het menu waar u de inschakelautoomaat kunt activeren.
- Schakel uw bevochtiger in door op de aan/uitschakelaar te drukken (B). Het groene led lampje gaat branden.

Stoppen beademing:

- druk knop (A) gedurende 2seconden in. Het toestel gaat in de stand-by modus. Er zal een akoestisch alarm volgen dat u moet resetten door eenmaal op knop (C) of (D) te drukken.
- Indien de inschakelautoomaat geactiveerd is zal het apparaat **niet** automatisch stoppen. U dient hem uit te zetten zoals hierboven beschreven.
- Schakel de bevochtiger uit door op knop (B) te drukken.

Alarmen


De Weinmann zal alarmeren indien:

- Er een grote lekkage of disconnectie is
- Als de netspanning wegvalt
- Als het toestel wordt uitgezet

Gedurende de alarmering blijft uw toestel functioneren en is uw beademing gewaarborgd!

Afhankelijk van de importantie van het alarm zal in het display de volgende melding komen: 1 driehoek (lage prioriteit), 2 driehoeken (gemiddelde prioriteit) en 3 (hoge prioriteit).


Storingen altijd bij fabrikant melden zie telefoonnummer op het apparaat van Vivisol: 013-5231023

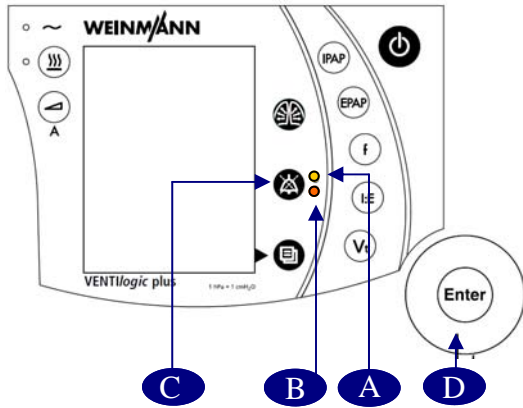


Vervolg alarmen

- Indien zich een alarmering voordoet van gemiddelde prioriteit zal het oranje lampje (A) oplichten.
- Indien zich een alarmering voordoet van hoge prioriteit gaat het rode lampje (B) oplichten.

Bovenstaande alarmen dienen ge-reset te worden middels knoppen (C) of (D). Indien u een van beide knoppen eenmaal indrukt zal het akoestisch alarm verdwijnen. De lampjes zullen pas doven indien de oorzaak van het alarm verholpen is. Indien u de oorzaak van het alarm niet verhelpt, zal het akoestisch alarm terugkeren.

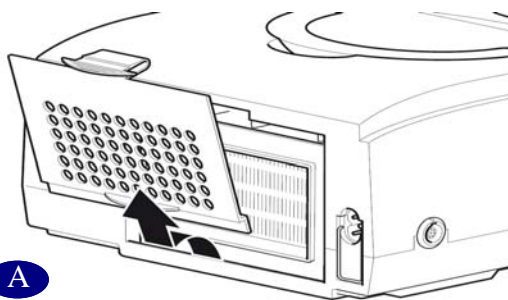

A

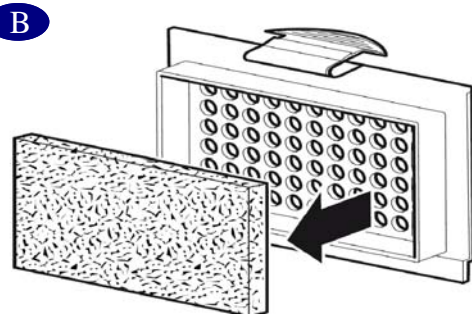

B

Onderhoud

- het (grijze) groffilter (zie afbeelding (B)) dient wekelijks gereinigd te worden door uit te kloppen.
- Het (witte) fijnfilter dient eenmaal per 1000 "draaiuren" vervangen te worden. Indien het toestel 1000 uren "gedraaid" heeft zal u een melding krijgen in het display om het filter te vervangen.

Beide filters bevinden zich aan de achterkant van uw toestel. (zie afbeelding (A)) achter de zwarte beschermkap.


Slangen dagelijks uithangen en laten drogen.

Masker schoonvegen.

Bevochtigingspot dagelijks leegmaken en drogen.

Nooit water hergebruiken.

Bevochtigingspot maximaal vullen tot zwarte streep.

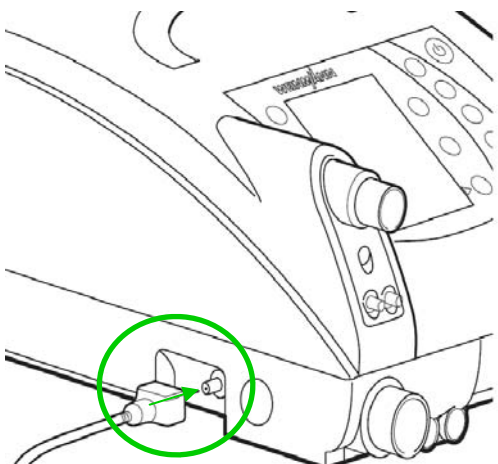

Zuurstof gebruik (optioneel)

De zuurstofaansluiting zit aan de linkerkant van het apparaat. Bij uw apparatuur heeft u een adapter gekregen die op de aansluiting geklikt kan worden.

De zuurstofslang van de concentrator dient hierop, **ZONDER BEVOCHTING** aangesloten te worden. De zuurstof wordt pas gemengd indien het apparaat ingeschakeld is.

- **Starten beademing:** EERST apparaat starten daarna zuurstof openzetten op (b.v.) concentrator
- **Beëindigen beademing:** EERST zuurstof uitschakelen op de concentrator, dan pas beademingsapparaat uitschakelen.