

# Hoe werkt uw apparaat voor beademing? (PrismaVENT 50c)

## De handleiding van het apparaat:

Het apparaat voor beademing bestaat uit twee delen (*zie foto 1*).

1. Het rechterdeel is voor de beademing
2. Het linkerdeel is voor de bevochtiging

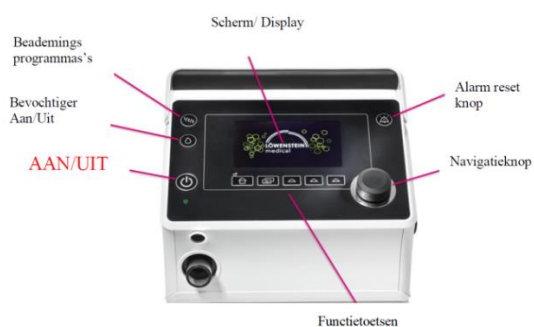


*Foto1: Beademingsapparaat (Prismavent)*

## **Het rechterdeel:**

Op het rechterdeel zit het scherm met de knoppen van het apparaat (*zie foto 2*). Hier kunt u werken met het apparaat. Zoals aan- en uitzetten, alarmen uitzetten, bevochtiging aanpassen.

Aan de voorkant zit het ronde koppelstuk voor de slang die naar uw masker gaat.



*Foto 2: Scherm en aanpassingsknoppen*

## **Het linkerdeel:**

Het linkerdeel is de bevochtiger. Hierin zit het waterbakje. Het water zorgt ervoor dat de lucht die u inademt vochtig blijft en verwarmd wordt.

## Het apparaat aanzetten

1. We raden u aan om het apparaat lager dan uw matras te zetten. Dan loopt de condens in de slang terug naar het apparaat en niet naar uw masker voor beademing.
2. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
3. Koppel de luchtbevochtiger los van het beademingsapparaat door op knop (A) te drukken (zie foto 3).

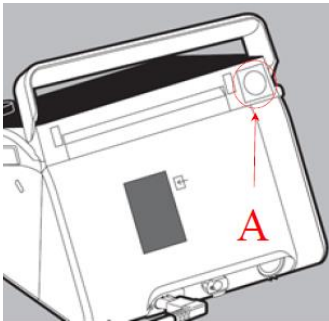


Foto 3: Loskoppelen luchtbevochtiger

4. Open de klep van het linkerdeel van het apparaat (zie foto 4). Haal het waterbakje eruit (1). Vul het bakje met schoon kraanwater (2). Plaats de klep weer op het gevulde waterbakje (3). Neem iedere dag schoon kraanwater.

Let op: Vul het waterbakje niet hoger dan de streep van 400ml.

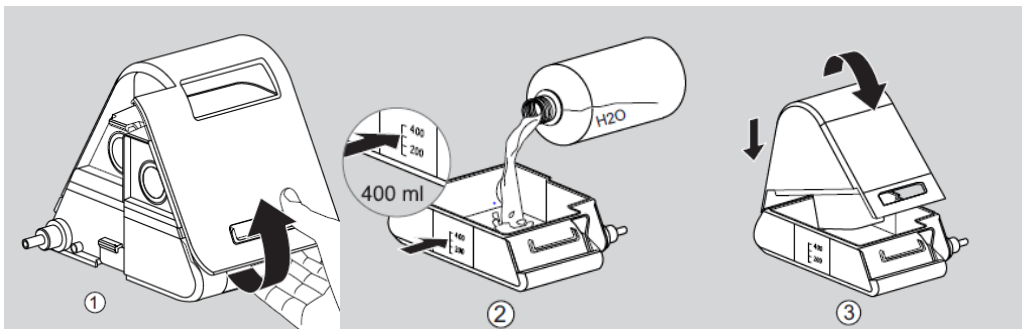


Foto 4: bevochtigingsdeel

5. Klik de bevochtiger (linkerdeel) weer terug op het beademingsapparaat (rechterdeel)
6. Sluit de beademings slang aan op het ronde koppelstuk aan de voorkant van het apparaat (zie foto 5).

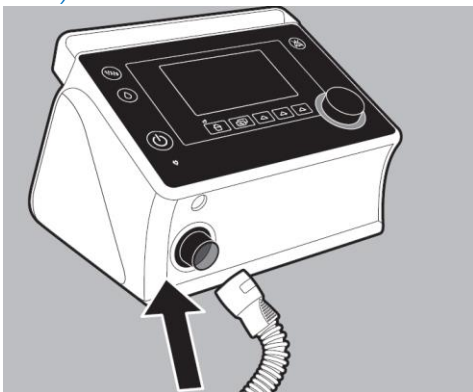


Foto 5: Koppelstuk van het apparaat

7. Zet uw masker voor beademing op. Sluit uw masker aan op de slang voor beademing.
8. Als het venster van het apparaat donker is, druk dan even op de aan-uitknop om het apparaat aan te zetten (zie foto 6). Als het apparaat op de functie “autostart” staat, blaas dan even in de slang of het masker.



Aan/uit toets

Foto 6: aan-uit knop

9. Als de luchtbevochtiger aanstaat komt er in het venster een symbool. Dat symbool geeft informatie over de situatie van de luchtbevochtiger (zie foto 7).




	Ademluchtbevochtiger aangesloten, maar niet actief (grijs symbool)
	Ademluchtbevochtiger ingeschakeld (groen symbool)
	Ademluchtbevochtiger leeg (oranje symbool)

Foto 7: Symbool luchtbevochtiger

### Aanpassen van de luchtbevochtiging

U drukt de **bevochtigingsknop** lang in. U kunt nu de stand van bevochtiging zelf aanpassen. Dat doet u door te draaien aan de **navigatieknop**. De standen gaan van 1 tot 6. Zet op de gewenste stand. Druk dan nog een keer op de navigatieknop om uw keuze te maken. Daarna drukt u op de hometoets. U bent dan weer in het beginscherm (zie foto 8). De laatste instelling wordt onthouden bij het herstarten van de beademing.

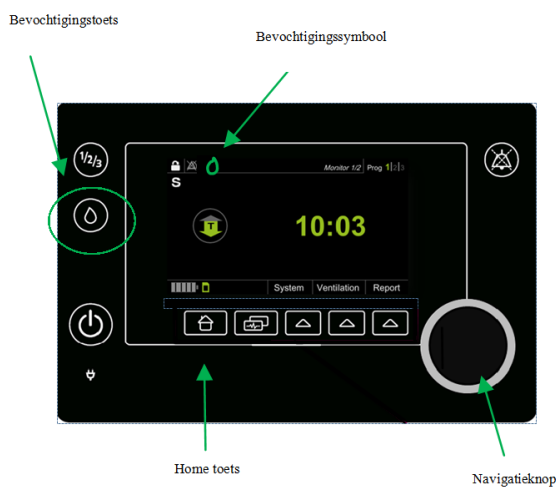


Foto 8: Beginscherm van het apparaat

### Het apparaat uitzetten.

1. Koppel de slang los van het masker.
2. Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat “therapie beëindigen” verdwijnt van het scherm (zie foto 9).

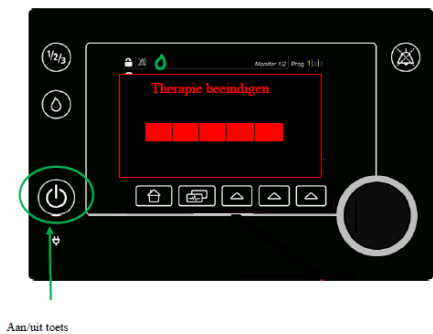


Foto 9: aan-uit knop

### Als het alarmsignaal afgaat

Als u een alarm hoort, staat in het scherm in rode kleur te lezen wat er aan de hand is. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

- de beademings slang is los gegaan van het masker of van het koppelingsstuk op het apparaat.
- Het masker sluit niet goed aan op uw gezicht, waardoor teveel lucht weglekt.

Bij deze problemen hoort u een alarm. U leest dan in het scherm de melding “disconnectie”. (A) U zet het alarm voor 2 minuten uit door kort op de alarmbel/ resettoets te drukken. (B)

De alarmbel/ resettoets (B) zal blijven knipperen totdat de storing verholpen is. Als u de storing binnen 2 minuten niet oplost gaat het alarm weer af.

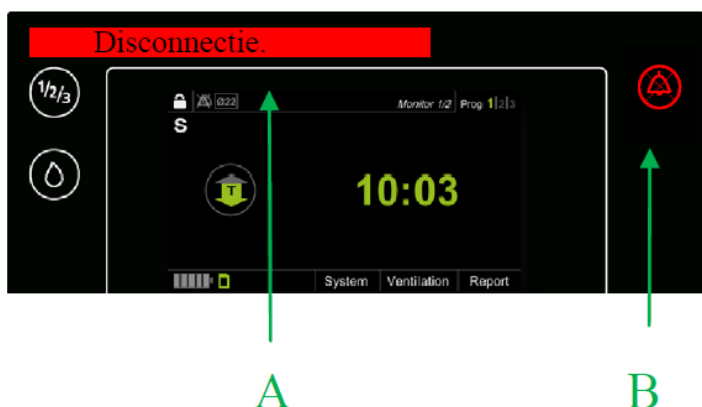


Foto 10 : Alarmen op het scherm


Technische storingen meldt u direct bij de firma.

Deze zijn 24 uur per dag bereikbaar: zie sticker op het apparaat.

## Zuurstof (O2) aansluiten

Indien u gebruik maakt van zuurstof dient u die aan te sluiten op de zuurstof nippel (zie foto).

Bij het **stoppen** van de beademing dient u eerst de **zuurstof** te stoppen en vervolgens na enkele seconden het **beademingsapparaat**. Zo voorkomt u dat er zuurstof ophoopt in het apparaat.

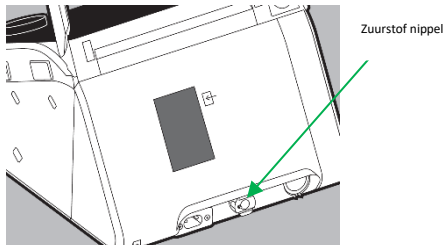

## Onderhoud

### Elke dag:


- Waterreservoir schoonmaken en beademingslang aan de lucht laten drogen.

Het waterreservoir mag u met warm water en afwasmiddel schoonmaken. Het waterreservoir met verwarmingselement mag u ook iedere week in de vaatwasser afwassen. U dient het waterreservoir te vervangen bij defecten.

Hang de slang bijvoorbeeld over een stoel met beide uiteinden naar beneden. De slangen kunnen dan uitlekken. Dat maakt de kans op ziektekiemen kleiner.

### Elke week:

- Spoel het luchtfilter uit met schoon water en plaats het droog terug. (zie foto). Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek.

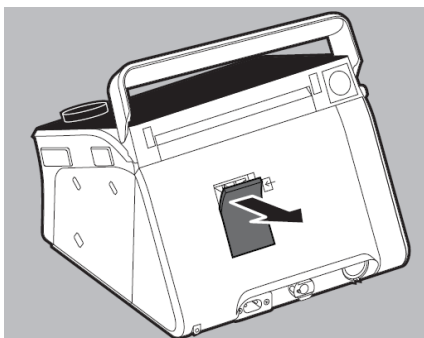


### Elk half jaar:


- Vervang het grijze luchtfilter. Neem het luchtfilter uit de achterkant van het apparaat (zie foto) en plaats het nieuwe filter terug. Deze kunt u in de webshop van Vivisol bestellen.

### Ontkalken van de luchtbevochtiger:

1. Open de bevochtigingskamer en vul het ondergedeelte van de bevochtigingskamer met 300 ml zuivere huishoudazijn.

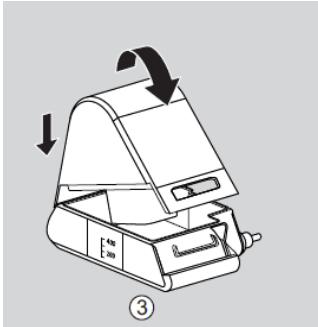

2. Neem het zwarte inzetstuk uit het bovengedeelte (zie foto) en leg dit in een kom met zuivere huishoudazijn. Het inzetstuk moet volledig ondergedompeld zijn.

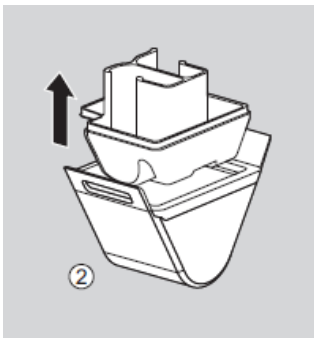

3. Laat de azijn 1 uur inwerken en spoel alles grondig af onder de kraan en droog deze grondig af.