

INFORMATIEMAP

AIRCURVE 10 RESMED



Ciro

Academisch Slaapcentrum
Hornerheide 1
6085 NM Horn
Tel: 0475-587600

Inhoudsopgave

- 3 Beschrijving en onderhoud beademingsapparaat
- 10 Belangrijke mededelingen
- 11 Beschrijving luchtbevochtiger
- 12 Storingen apparatuur
- 13 Risicovolle handelingen
- 15 Aftekenlijst periodiek onderhoud
- 16 Bestelprocedure
- 19 Bruikleenovereenkomst

Contactgegevens:

Academisch Slaapcentrum Ciro
Hornerheide 1
6085 NM Horn
Telefoon: 0475-587600

Beschrijving beademingsapparaat

Inleiding

De AutoSet CS-A wordt gebruikt ter ondersteuning van onvoldoende of een falende ademhaling. Het apparaat wordt gebruikt ter voorkoming van de gevolgen van ademhalingsstoornissen of onvoldoende ademhaling tijdens slaap.

Werking apparaat

AutoSet CS-A is geïndiceerd om de ventilatie te stabiliseren van volwassen patiënten met centrale slaapapneu (CSA), gemengde slaapapneu, periodieke ademhaling of Cheyne-Stokes-ademhaling (CSR), al dan niet in combinatie met congestief hartfalen, en met of zonder obstructieve slaapapneu. De AutoSet CS-A is bedoeld voor gebruik thuis en in het ziekenhuis.


Het apparaat behandelt centrale slaapapneu en/of gemengde apneu en periodieke ademhaling door de drukondersteuning druk automatisch aan te passen, terwijl binnen de gestelde grenzen. In de ASV-modus wordt de expiratoire positieve luchtdruk (EPAP) aangepast om obstructieve slaapapneugebeurtenissen te elimineren.

Naast de functionaliteit van de ASV-modus biedt het apparaat in de ASVAuto-modus automatische aanpassing van de uitademingsdruk aan zodat alleen de voor het openhouden van de bovenste luchtwegen vereiste hoeveelheid druk (EPAP) wordt verschaft. Het apparaat analyseert van ademdeug tot ademdeug de toestand en past zijn druk automatisch aan.

Na het instellen wordt het apparaat vergrendeld zodat deze niet abusievelijk veranderd kunnen worden.

Ingebruikname apparaat


Het apparaat is altijd aangesloten op de netspanning. Het apparaat heeft dus geen interne accu en zal dus uitvallen indien de stroom onderbroken wordt. In het display zijn de instellingen zichtbaar.

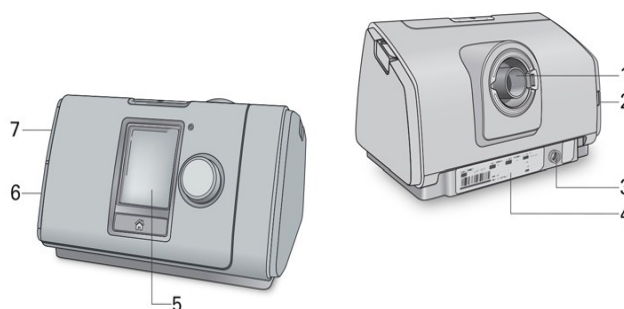


Over uw apparaat

- 1 Luchtuitlaat 5 Scherm
- 2 Luchtfilterdeksel 6 Adapterdeksel
- 3 Voedingsaansluiting 7 SD-kaartdeksel
- 4 Serienummer en apparaatnummer
- 5 scherm
- 6 adapterdeksel
- 7 SD-kaartdeksel

Over het bedieningspaneel

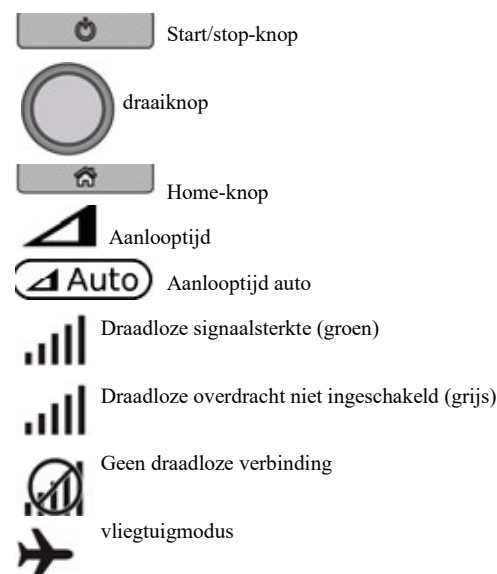

Beschrijving beademingsapparaat

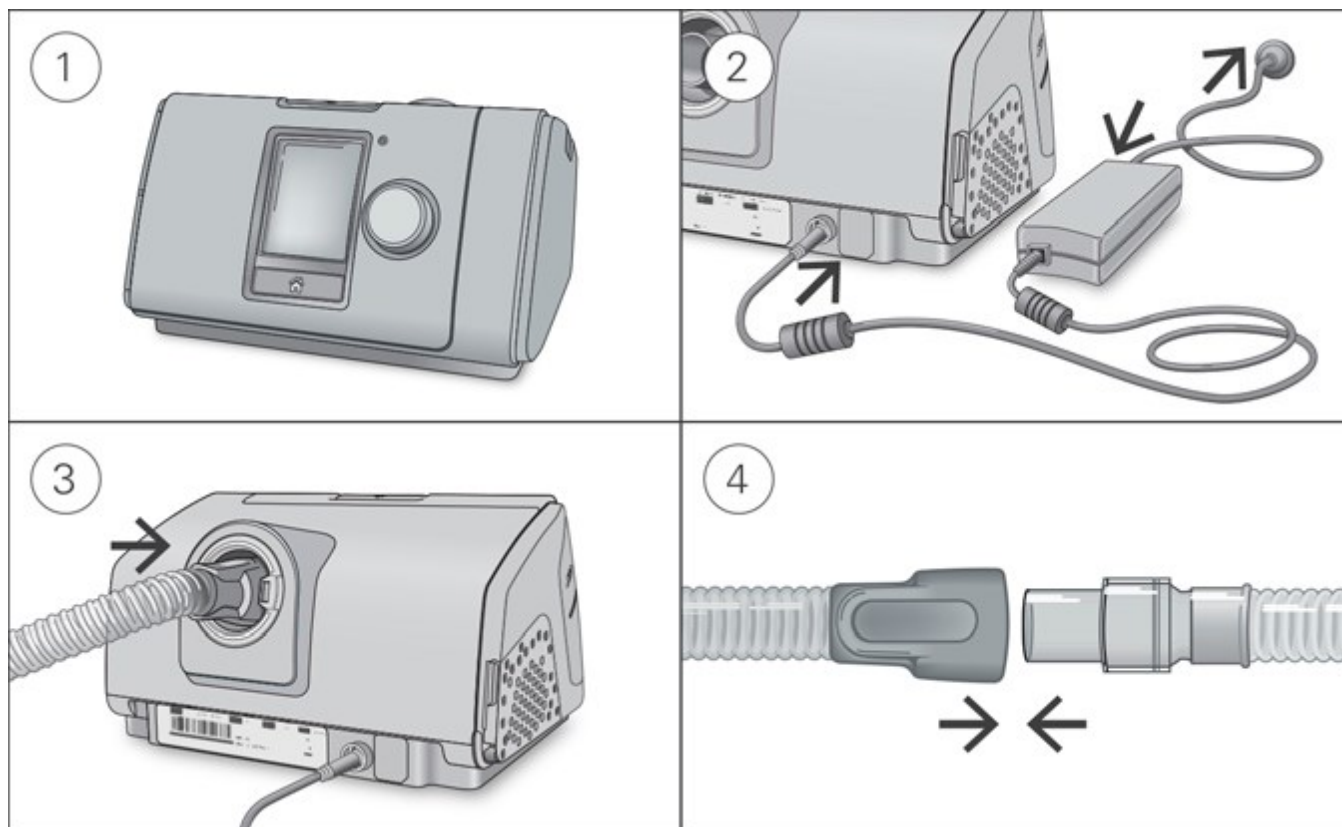

1. Plaats het apparaat op een stabiel, horizontaal oppervlak.
2. Steek de stekker in de achterkant van het apparaat. Sluit het ene uiteinde van het elektriciteitsnoer aan op de voedingseenheid en het andere uiteinde op het stopcontact.
3. Sluit de luchtslang stevig aan op de luchtuitlaat op de achterkant van het apparaat.
4. Sluit het vrije uiteinde van de luchtslang stevig aan op het in elkaar gezette masker.

De therapie starten

1. Breng het masker aan.
 2. Druk op Start/Stop of adem gewoon als SmartStart is ingeschakeld.
- U merkt dat de therapie is ingeschakeld doordat het scherm Slaaprapport wordt weergegeven.



De huidige behandelingsdruk wordt in het groen getoond. Tijdens de aanlooptijd loopt de druk geleidelijk op en ziet u een draaiende cirkel. Als eenmaal de voorgeschreven behandelingsdruk is bereikt, is de hele cirkel groen. Na een korte tijd wordt het scherm automatisch zwart. U kunt op Home of op de draaiknop drukken om het weer in te schakelen. Als de stroom wordt onderbroken tijdens de therapie, wordt de therapie automatisch opnieuw opgestart wanneer de stroom wordt hersteld.

Beschrijving beademingsapparaat

Het Aircurve 10-apparaat heeft een lichtsensor die de helderheid van het scherm aanpast aan het omgevingslicht.

De therapie stoppen

1. Zet het masker af.
2. Druk op Start/Stop; als anderzijds SmartStart geactiveerd is, stopt de therapie na enkele seconden automatisch.

Het Slaaprapport geeft u nu een samenvatting van uw therapiesessie.



Gebruik uren—Geeft het aantal uren therapie aan dat u bij de vorige sessie hebt ontvangen.

Maskerafdichting—Geeft aan hoe goed uw masker is afgedicht:



Goede maskerafdichting



Afstelling vereist. Zie maskerpas

Tot. uren gebruikt: Geeft het totale aantal uren aan dat u het apparaat hebt gebruikt sinds u het in gebruik hebt genomen.

Als dit door uw zorgverlener is ingesteld, ziet u ook:

Gebeurt. per uur: Geeft het aantal per uur ondervonden gevallen van apneu en hypopneu aan.

Meer info: Draai aan de draaiknop om omlaag te schuiven en meer gedetailleerde gebruiksgegevens te bekijken.

Spaarstand

Het Aircurve 10 apparaat registreert uw therapiegegevens. Om te zorgen dat de gegevens naar uw zorgverlener kunnen worden verzonden, moet u het elektriciteitsnoer van het apparaat niet loskoppelen. Wel kunt u het in de spaarstand zetten om stroom te besparen.

Naar de spaarstand gaan:

- Houd Start/Stop drie seconden lang ingedrukt.

Het scherm wordt zwart.

De spaarstand afsluiten:


- Druk Start/Stop eenmaal in.

Het Home -scherm wordt getoond

Beschrijving beademingsapparaat

Mijn opties

Uw Aircurve 10-apparaat is door uw zorgverlener ingesteld op uw behoeften, maar mogelijk wilt u kleine aanpassingen verrichten om de therapie comfortabeler te maken.

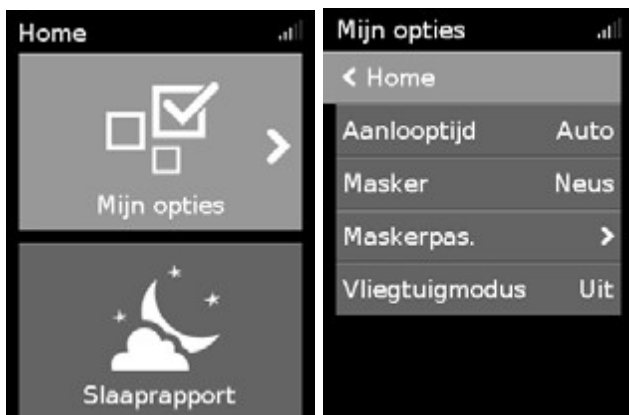

Markeer **Mijn opties** en druk op de draaiknop om uw huidige instellingen te bekijken. Hier vandaan kunt u de opties aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Aanlooptijd

De aanlooptijd is de periode waarin de druk toeneemt van een lage startdruk naar de voorgeschreven behandelingsdruk, en is erop gericht om het begin van de therapie prettiger te laten verlopen.

U kunt de aanlooptijd instellen op Uit, 5 tot 45 minuten of Auto. Wanneer Aanlooptijd is ingesteld op Auto, detecteert het apparaat het wanneer u in slaap bent gevallen en loopt de druk dan op tot de voorgeschreven behandelingsdruk.



De aanlooptijd aanpassen:

1. Draai in **Mijn opties** aan de draaiknop totdat **Aanlooptijd** gemarkeerd is en druk vervolgens op de draaiknop.
2. Draai aan de draaiknop om de aanlooptijd af te stellen op de gewenste instelling en druk op de draaiknop om de wijziging op te slaan.

Maskerpasvorm

Maskerpas is ontworpen om u te helpen om mogelijke luchtlekken rond uw masker te beoordelen en identificeren.



Maskerpasvorm controleren:

1. Zet het masker op zoals beschreven in de gebruikershandleiding van het masker.
 2. Draai in **Mijn opties** aan de draaiknop totdat **Maskerpas.** gemarkeerd is en druk vervolgens op de draaiknop. Het apparaat begint lucht te blazen.
 3. Stel het masker, het maskerkussentje en de hoofdband bij tot u het resultaat **Goed** krijgt.
- Om Maskerpas stop te zetten drukt u op de draaiknop of op Start/Stop. Als het u niet lukt een goede maskerafdichting te verkrijgen, overleg dan met uw zorgverlener.

Beschrijving beademingsapparaat

Meer opties

Mogelijk heeft uw zorgverlener u toegang gegeven tot enkele andere opties voor persoonlijke instelling.

Drukverlichting

Wanneer Drukverlichting geactiveerd is, is het uitademen mogelijk gemakkelijker voor u. Dit kan u helpen bij het wennen aan de therapie.

SmartStart

Wanneer SmartStart geactiveerd is, start de therapie automatisch wanneer u in het masker ademt. Wanneer u het masker afzet, stopt de therapie na enkele seconden automatisch.


Masker

Deze optie toont uw maskerinstelling. Als u meer dan één maskertype gebruikt, wijzigt u deze instelling wanneer u overschakelt op een ander masker.

Verzorging van het apparaat

Het is belangrijk om het AirSense 10-apparaat regelmatig te reinigen, om te zorgen dat u optimale therapie ontvangt. De volgende paragrafen helpen u bij het uit elkaar halen, reinigen, controleren en weer in elkaar zetten van het apparaat.

De luchtslang loskoppelen

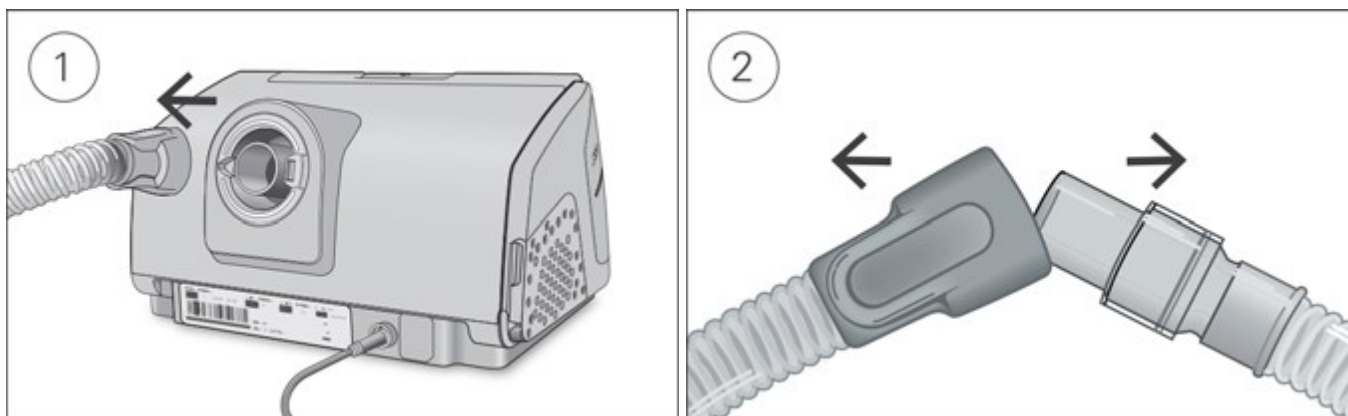

1. Houd de manchet van de luchtslang vast en trek deze voorzichtig van het apparaat af.
2. Houd zowel de manchet van de luchtslang als het draaistuk van het masker vast en trek ze vervolgens voorzichtig uit elkaar.

Reiniging

U moet het apparaat wekelijks reinigen volgens de instructies. Zie de gebruikershandleiding van het masker voor gedetailleerde aanwijzingen voor het reinigen van het masker.

1. Was de luchtslang in warm water met een mild reinigingsmiddel. Niet reinigen in een vaatwasser of vaatwasmachine.
2. Spoel de luchtslang goed door en laat hem drogen uit de buurt van direct zonlicht en/of warmte.
3. Neem de buitenkant van het apparaat af met een droge doek.


Controleren

U moet de luchtslang en het luchtfilter regelmatig op schade controleren.

1. Controleer de luchtslang en vervang hem als er gaten, scheuren of barsten in zitten.
2. Controleer het luchtfilter en vervang het in elk geval om de zes maanden. Vaker vervangen als er gaten in zitten of als het verstopt raakt met vuil of stof.

Beschrijving beademingsapparaat

Het luchtfilter vervangen:

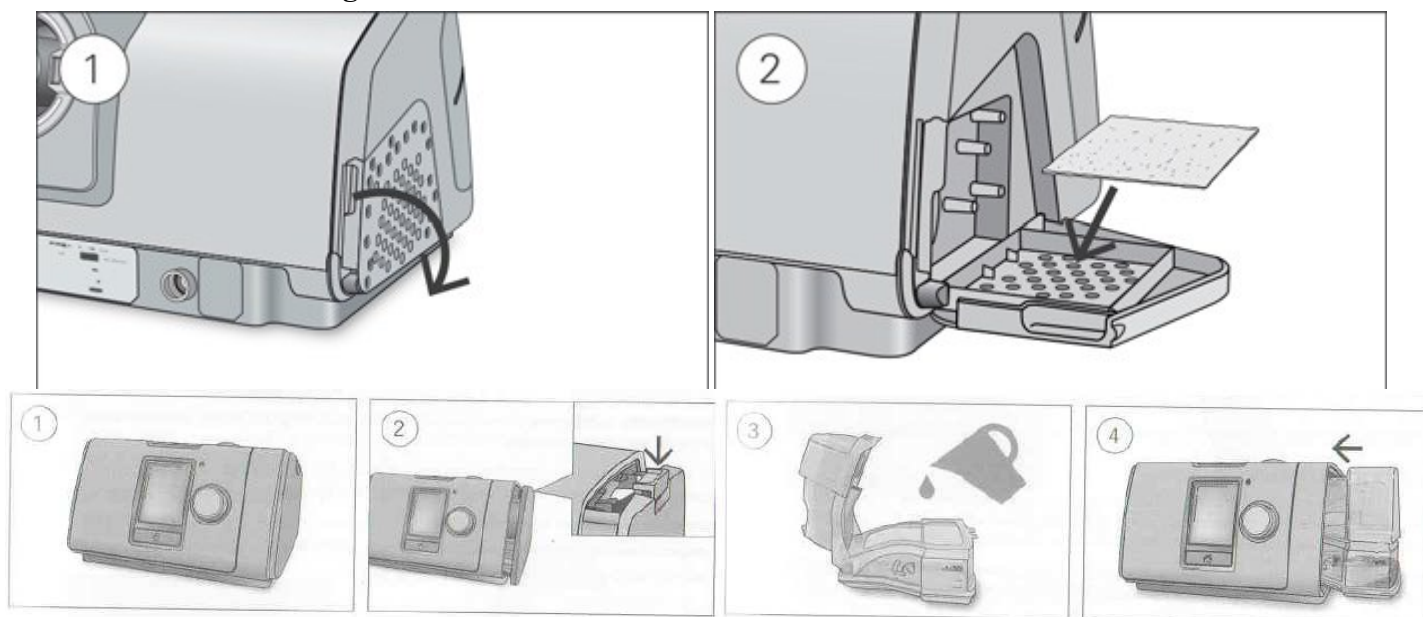

1. Open het luchtfilterdeksel en verwijder het oude luchtfilter. Het luchtfilter is niet wasbaar/herbruikbaar.
2. Breng een nieuw luchtfilter aan op het luchtfilterdeksel en sluit het vervolgens. Zorg dat het luchtfilter altijd op zijn plaats zit, om te voorkomen dat water en stof in het apparaat terechtkomen.

De luchtslang weer aansluiten

Wanneer de luchtslang droog is, kunt u hem weer op het apparaat aansluiten.

1. Sluit de luchtslang stevig aan op de luchtuitlaat op de achterkant van het apparaat.
2. Sluit het vrije uiteinde van de luchtslang stevig aan op het in elkaar gezette masker.

Therapiegegevens

Het Aircurve10-apparaat registreert uw therapiegegevens voor u en uw zorgverlener, zodat deze uw therapie kan bekijken en er zo nodig wijzigingen in kan aanbrengen. De gegevens worden geregistreerd en vervolgens draadloos of via een SD-kaart overgebracht naar uw zorgverlener.

Gegevensoverdracht

Uw Aircurve 10-apparaat heeft een functie voor draadloze communicatie waarmee uw therapiegegevens naar uw zorgverlener kunnen worden verzonden ter verbetering van de kwaliteit van uw behandeling. Dit is een optionele functie die alleen beschikbaar is als u besluit deze te benutten. De functie stelt ook uw zorgverlener in staat om sneller uw therapie-instellingen of de apparaatsoftware bij te werken, zodat u de best mogelijke therapie ontvangt.


De gegevens worden gewoonlijk verzonden nadat de therapie beëindigd is. Om te zorgen dat uw gegevens worden overgebracht, laat u het apparaat altijd aangesloten op het stopcontact en zorgt u dat het niet in de vliegtuigmodus staat.

NB:

- De therapiegegevens worden mogelijk niet verzonden als u het apparaat buiten het land of de regio gebruikt waar het is aangeschaft.
- Apparaten met draadloze communicatie zijn mogelijk niet in alle regio's verkrijgbaar.

Beschrijving beademingsapparaat

De SD-kaart verwijderen

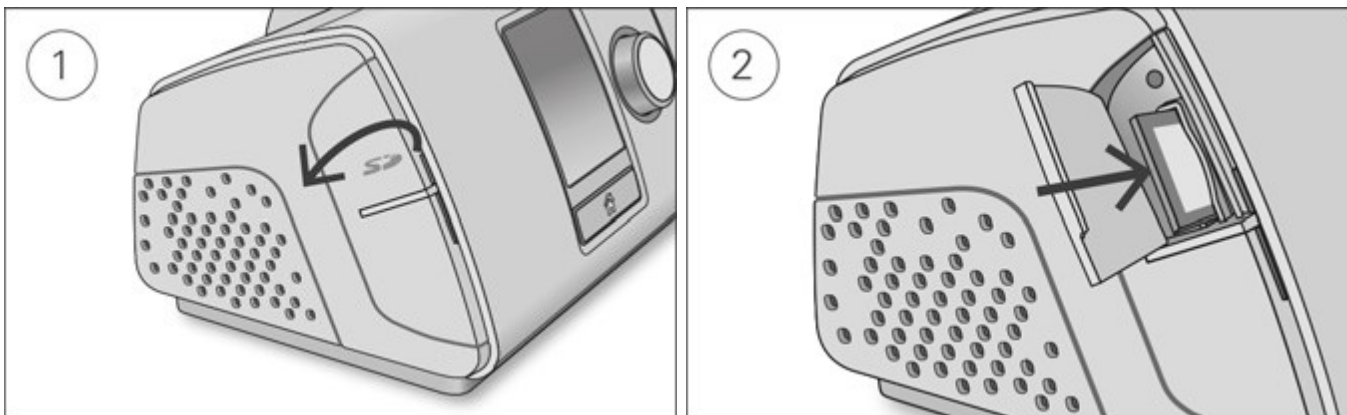

1. Open het SD-kaartdeksel.
2. Duw de SD-kaart iets naar binnen om hem te kunnen verwijderen. Verwijder de SD-kaart uit het apparaat. Plaats de SD-kaart in het beschermhoesje en stuur hem terug naar uw zorgverlener. Raadpleeg voor meer informatie over de SD-kaart het beschermhoesje van de SD-kaart dat bij het apparaat geleverd is.

NB: De SD-kaart mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Reizen

U kunt het Aircurve 10-apparaat overal mee naartoe nemen. Denk hierbij aan de volgende punten:

- Gebruik de meegeleverde reistas om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- Zorg dat u het juiste elektriciteitsnoer hebt voor de regio waar u naar op reis gaat. Voor informatie over de aanschaf hiervan neemt u contact op met uw zorgverlener.

Reizen per vliegtuig

Het Aircurve 10-apparaat mag mee in uw handbagage. Medische hulpmiddelen worden niet meegerekend in het maximale gewicht van uw handbagage.

U kunt het Aircurve 10-apparaat op het vliegtuig gebruiken, want het voldoet aan de vereisten van de Federal Aviation Administration (FAA). Op www.resmed.com vindt u begeleidende brieven voor luchtreizen die u kunt downloaden en afdrukken.

Wanneer u het apparaat gebruikt op een vliegtuig, schakelt u de **vliegtuigmodus** in.



De vliegtuigmodus inschakelen:

1. Draai in **Mijn opties** aan de draaiknop totdat **Vliegtuigmodus** gemarkeerd is en druk vervolgens op de draaiknop.
2. Draai aan de draaiknop om **Aan** te selecteren en druk vervolgens op de draaiknop om de wijziging op te slaan.

Rechtsboven op het scherm wordt het pictogram van de vliegtuigmodus weergegeven.

Belangrijke mededelingen

Instellingen beademingsapparaat

De instellingen van uw beademingsapparaat zijn door uw behandelende arts bepaald. Deze kunnen in principe niet door anderen gewijzigd worden omdat deze “gelocked” zijn. Verder zal er op het beademingsapparaat een sticker achtergelaten worden waarop uw instellingen vermeld staan. Dit is met name van belang indien u eventueel opgenomen wordt in een ander ziekenhuis. Zo kan uw behandelend specialist aldaar in een oogopslag zien hoe uw apparaat ingesteld is.


Daarnaast is het ook belangrijk voor de leverancier van uw beademingsapparaat. Zij komen jaarlijks onderhoud plegen aan uw apparaat. Zij hebben deze instellingen nodig om uw apparaat te resetten.

Maskerbeademing en mogelijke complicaties

Indien u een mond/neusmasker voorgeschreven krijgt, bestaat de mogelijkheid op het ontstaan van enkele complicaties:

- Zorg dus altijd dat het masker goed aansluit op neus. De kans is dan nihil dat u hier last van krijgt. Indien dit toch het geval is (*rode pijnlijke ogen*) dient u contact op te nemen met uw huisarts.
- Verder bestaat de mogelijkheid dat u tijdens het gebruik van de beademing last krijgt van een droge mond of tong. Dit is een vaak voorkomend probleem. De actieve bevochtiging kan dit maar ten dele compenseren en dus het ongemak ook maar ten dele opheffen. U kunt contact opnemen met het slaapcentrum. deze kan u adviseren welke alternatieven mogelijk zijn.
- Als laatste bestaat de mogelijkheid dat de huid, daar waar het in contact komt met het masker, een licht reactie vertoont in de vorm van roodheid. Dit is een normaal verschijnsel en trekt in de regel weg. Indien de klachten verergeren (*jeuk, blaasjes, eczeem*) dient u contact op te nemen met de huisarts. Mogelijk dat u allergisch reageert op het masker.
- Pijn op de rug van de neus, daar waar het masker de neusrug raakt. Dit is afhankelijk van de ingestelde druk, de conditie van de huid en vorm van het gezicht/neus. Indien dit optreedt lunt u contact opnemen met het slaapcentrum. Wij kunnen u advies geven en eventueel hulpmiddelen ter beschikking stellen (*gelpad*).
- Een andere complicatie kan conjunctivitis zijn. Dit is een ontsteking van het oogvlies. Dit kan ontstaan doordat er continu lucht richting de ogen blaast door lekkage LANGS het masker, m.a.w. het masker sluit niet goed aan op het gezicht.
-

Beschrijving luchtbevochtiger

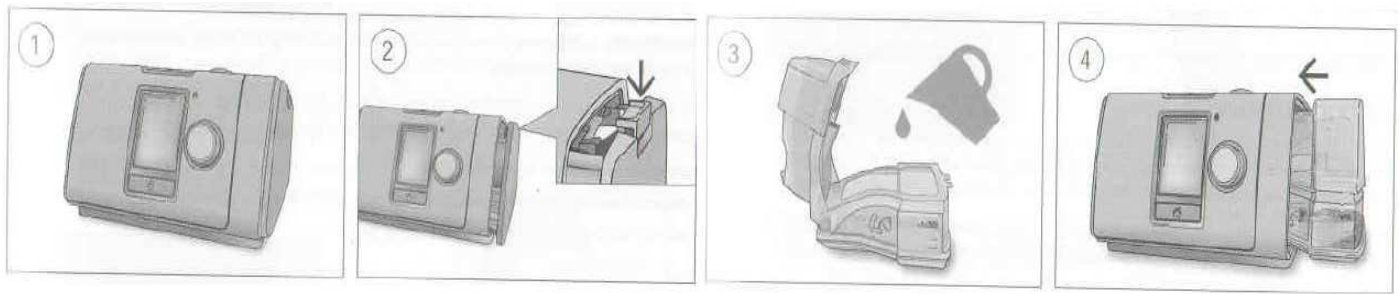

- 1) Plaats het apparaat op een stabiel, horizontaal oppervlak
- 2) Neem het zijdeksel van het apparaat door op de clip van het zijdeksel te drukken en het deksel uit het apparaat te schuiven
- 3) Open de bevochtiger en vul het tot aan de markering voor maximaal waterpeil met water (dat weinig tot geen kalk bevat)
- 4) Sluit de bevochtiger en schuif deze in de zijkant van het apparaat

Storingen apparatuur en calamiteiten

Storingen apparatuur

Indien er een **urgente** storing aan uw beademingsapparaat is ontstaan, dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke firma:

VIVISOL telefoonnummer: 013-5231023.

Vivisol is bereikbaar tijdens kantooruren

De apparatuur is en blijft eigendom van het CTbM. Bij oneigenlijk gebruik kunnen er kosten op u verhaald worden.

De apparatuur is verzekerd binnen de EEG enkel tegen brand en diefstal.

Het is niet toegestaan defecten zelf te repareren of andere aanpassingen aan te brengen aan het apparaat en/of systeem.

Risicovolle handelingen

Maskerbeademing 5.1

U wordt beademd middels een masker. Uiteraard zijn er verschillende vormen en soorten maskers, zoals neusmaskers, mond-neusmaskers en “Total face -maskers”. De keuze wordt bepaald door enerzijds de aard van de toepassing en anderzijds, uw comfort.

Het op en afzetten van beademingsmaskers en het starten van de beademingsmachine zijn handelingen die geïnstrueerd moeten worden en vastgelegd zijn in een protocol.

Aandachtspunten

Bij maskerbeademing dient u goed te letten op:

- Minimaliseren van lekkage. Door het masker opnieuw af te stellen kan dit verholpen worden.
- Extra aandacht is vereist voor de druk op de neusrug. Door de tere huid en de harde ondergrond van bot kan deze makkelijk stuk gaan i.c.m. de uitwendige druk van het masker.
- Let op huidirritaties
- Let op verschijnselen van oogontsteking, deze kan veroorzaakt worden door lekkage van lucht langs het masker, richting ogen
- Luchtlekkage via mond (bij neusmasker), dit kan voorkomen worden door gebruik te maken van kinband

Bovenstaande alarmen zijn het gevolg van een lekkage in het systeem (*slangen en masker*). Controleer de volgende zaken:

- Toestand patient, benauwd, paniek?
- Is er luchtlekkage rondom het masker?
- Lekt er lucht via de mond?
- Zitten de slangen nog goed aangesloten aan het beademingsapparaat?
- Zit er een scheur in de slangen?
- Zit het masker goed in elkaar? (*controleer cushion*)

Onderhoud

- Handel volgens de onderhoudsvoorschriften die in uw ctb –map vermeld staan.
- Slangen dagelijks laten drogen
- Indien men gebruik maakt van een elektrische bevochtiger dient men deze dagelijks te voorzien van schoon water.
- Afgekookt en afgekoeld water eenmalig gebruiken.

Zuurstof toedienen (optioneel)

Aansluiten zuurstof:

- open de kraan van de zuurstofbron en doseer deze zoals afgesproken is door uw arts.
- Zet beademingstoestel aan
- Sluit de zuurstofslang aan op de zuurstofconnector van het beademingsapparaat.
-

Afsluiten zuurstof:

- koppel eerst de zuurstof af van het beademingsapparaat, zet daarna het beademingsapparaat uit.

Alarmen

De meest voorkomende alarmen zijn : “*patient verbroken*”, “*mask alarm*”, “*ipap low*” en “*disconnectie*” alarmen. Dit is afhankelijk van welk beademingsapparaat u gebruikt.

Risicovolle handelingen

Maskerbeademering 5.1

Zuurstof toedienen (optioneel)

Te veel zuurstof kan schadelijk zijn, houdt u dus aan de voorgeschreven hoeveelheid

Bij gebruik van zuurstof geen VET gebruiken, geen OPEN VUUR of ROKEN! Zuurstof wakert vuur aan en kan zelfs tot ontploffingen leiden.

5.1	Maskerbeademering
<i>Doel:</i>	Het aanbrengen van het beademingsmasker op dusdanige wijze dat efficiënte beademing via masker gewaarborgd is.
<i>Benodigheden:</i>	• Masker • Beademingsapparaat/ actieve bevochtiger • Gebruiksaanwijzing apparatuur
<i>Werkwijze:</i> Aansluiten	1. Was de handen en zet alle benodigheden klaar 2. Zet het beademingsapparaat aan 3. Controleer de stroomvoorziening en eventueel de accu 4. Controleer de instellingen en de alarmgrenzen 5. Indien de alarmgrenzen niet kloppen, neem dan contact op met het ctb 6. Controleer de alarmen van het apparaat. Zolang de cliënt niet aangesloten is dient het apparaat te alarmeren. 7. Plaats het beademingsmasker op het gezicht, zorg ervoor dat het niet te strak en ook niet te los zit 8. Sluit de beademingsslang aan op het masker 9. Controleer of het beademingsapparaat druk opbouwt en of de borstkast omhoog gaat
<i>Werkwijze:</i>	10. Vraag de cliënt of de beademing naar wens verloopt. 11. Zet eerst het masker af
<i>Werkwijze:</i> Afsluiten	1. Zet eerst het masker af 2. Zet het beademingsapparaat uit 3. Zet de bevochtiger uit 4. Maak het apparaat klaar voor de volgende gebruikperiode

Bestelprocedure



VIVISOL
SOLGROUP Home Care Services

Home Uitloggen Uw account

In bestelling
U heeft geen artikelen geselecteerd.

ARTIKELEN MIJN VIVISOL HOME

Mijn disposables

Artikelen

- Beademing

Welkom op Mijn VIVISOL. Hier bestelt u vanaf 6 maart 2017 de disposables voor uw beademingsapparatuur. Onlangs heeft u per post de brochure ontvangen, waarin wordt uitgelegd hoe u deze kunt bestellen. Heeft u deze niet ontvangen? [Klik dan hier](#) om de brochure te downloaden.

Heeft u vragen over de artikelen die u aantreft in uw account? Neem dan contact op met uw Centrum voor Thuisbeademing. Heeft u vragen over uw bestelling? Aarzel dan niet, en neem tijdens kantooruren contact met ons op via telefoonnummer 013-5231023. Een e-mail sturen naar beademing@vivisol.nl kan natuurlijk ook. Wij zijn u graag van dienst!

Mijn VIVISOL


Deze website is onderdeel van de dienstverlening van VIVISOL.

Contact

Contactadres
VIVISOL Nederland BV
Smeerdvondstraat 27
5048 AV TILBURG

Tel: +31 (0)13 5231023
Fax: +31 (0)13 5231029
E-mail: beademing@vivisol.nl

Deze pagina verzenden
Toevoegen aan Bestelbare artikelen

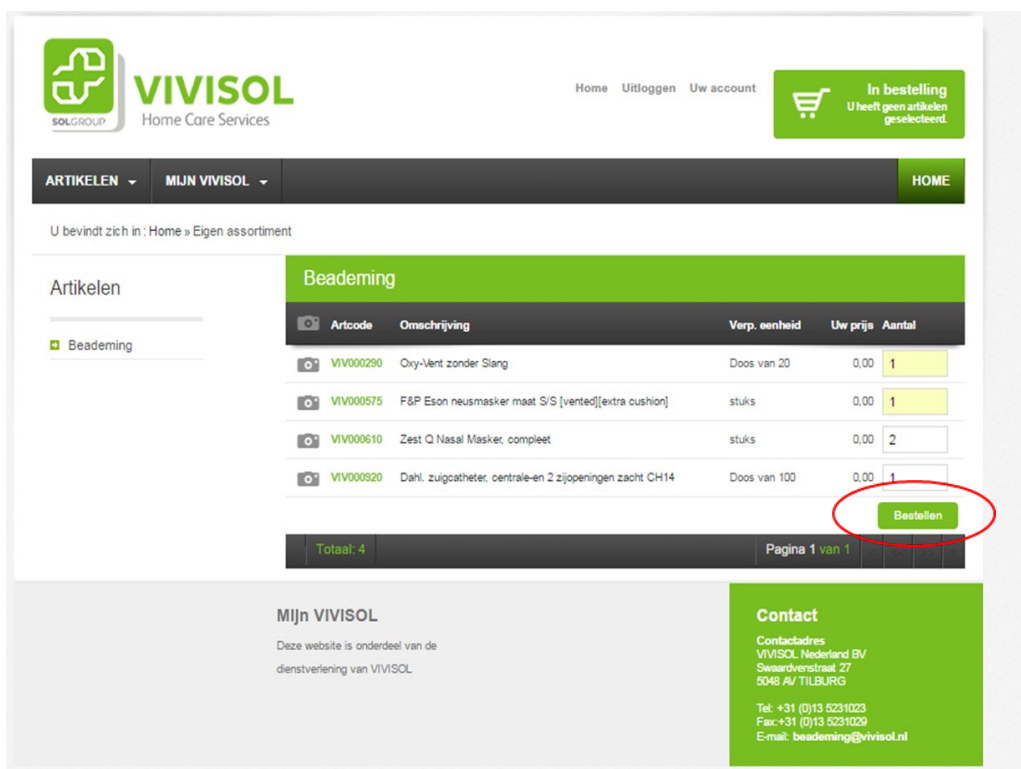

VIVISOL
SOLGROUP Home Care Services

Home Uitloggen Uw account

In bestelling
U heeft geen artikelen geselecteerd.

ARTIKELEN MIJN VIVISOL HOME

U bevindt zich in: Home » Eigen assortiment

Artikelen

- Beademing

Beademing

Artcode	Omschrijving	Verp. eenheid	Uw prijs	Aantal
VIV000290	Oxy-Vent zonder Slang	Doos van 20	0,00	1
VIV000575	F&P Eson neusmasker maat S/S [vented][extra cushion]	stuks	0,00	1
VIV000610	Zest Q Nasal Masker, compleet	stuks	0,00	2
VIV000920	Dahl. zuigcatheter, centrale-en 2 zijopeningen zacht CH14	Doos van 100	0,00	1

Totaal: 4 Pagina 1 van 1

Bestellen

Mijn VIVISOL

Deze website is onderdeel van de dienstverlening van VIVISOL.

Contact

Contactadres
VIVISOL Nederland BV
Smeerdvondstraat 27
5048 AV TILBURG

Tel: +31 (0)13 5231023
Fax: +31 (0)13 5231029
E-mail: beademing@vivisol.nl


VIVISOL
 Home Care Services

[Home](#)
[Uitloggen](#)
[Uw account](#)


In bestelling
 5 Artikel(en)
 Bedrag: € 0,00

ARTIKELEN
MIJN VIVISOL
HOME

U bevindt zich in: Home » Eigen assortiment

Artikelen

- Beademing

Beademing

Artcode	Omschrijving	Verp. eenheid	Uw prijs	Aantal
VIV000290	Oxy-Vent zonder Slang	Doos van 20	0,00	
VIV000575	F&P Eson neusmasker maat S/S [vented][extra cushion]	stuks	0,00	
VIV000610	Zest Q Nasal Masker, compleet	stuks	0,00	
VIV000920	Dahl. zuigcatheter, centrale-en 2 zijopeningen zacht CH14	Doos van 100	0,00	

Totaal: 4
Pagina 1 van 1

Bestellen

Mijn VIVISOL
 Deze website is onderdeel van de dienstverlening van VIVISOL

Contact
 Contactadres
 VIVISOL Nederland BV
 Swardersstraat 27
 5046 AV TILBURG
 Tel: +31 (0)13 5231023
 Fax: +31 (0)13 5231029
 E-mail: beademing@vivisol.nl


VIVISOL
 Home Care Services

[Home](#)
[Uitloggen](#)
[Uw account](#)


In bestelling
 5 Artikel(en)
 Bedrag: € 0,00

ARTIKELEN
MIJN VIVISOL
HOME

U bevindt zich in: Home »

Tot het moment dat u de 4 stappen heeft doorlopen, kunt u nieuwe artikelen toevoegen aan uw bestelling

Artcode	Artikel(en)	Verp. eenheid	Aantal	Prijs	Bedrag
VIV000290	Oxy-Vent zonder Slang	Doos van 20	1	€ 0,00	€ 0,00 
VIV000575	F&P Eson neusmasker maat S/S [vented][extra cushion]	stuks	1	€ 0,00	€ 0,00 
VIV000610	Zest Q Nasal Masker, compleet	stuks	2	€ 0,00	€ 0,00 
VIV000920	Dahl. zuigcatheter, centrale-en 2 zijopeningen zacht CH14	Doos van 100	1	€ 0,00	€ 0,00 

Annuleren
Naar artikelen
Bestelling indienen

Mijn VIVISOL
 Deze website is onderdeel van de dienstverlening van VIVISOL

Contact
 Contactadres
 VIVISOL Nederland BV
 Swardersstraat 27
 5046 AV TILBURG
 Tel: +31 (0)13 5231023
 Fax: +31 (0)13 5231029
 E-mail: beademing@vivisol.nl