


## Medela uitzuigapparaat type basic 30

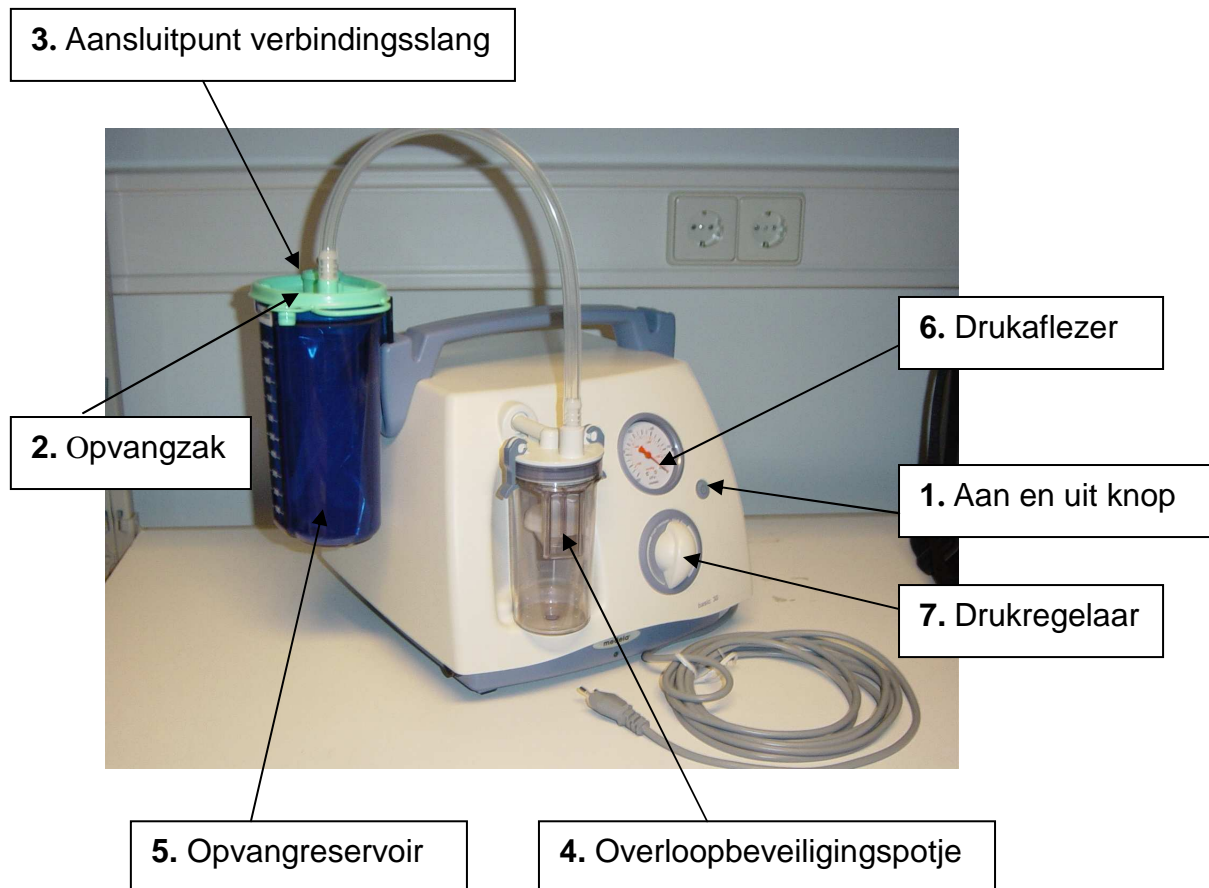

### Inleiding

Voor gebruik thuis heeft u een elektrisch zuigapparaat meegekregen dat op een wandcontactdoos dient te worden aangesloten.

### Beschrijving Medela zuigapparaat

De Medela uitzuigapparaat bestaat uit de volgende onderdelen:

Het opvangreservoir (5) met deksel en disposable opvangzak (2) waarin via de verbindingsslang en de zuigkatheter het weggezogen secret terecht komt. De verbindingsslang wordt bij (3) aangesloten. Het apparaat heeft een overloopbeveiligingspotje (4) waardoor voorkomen wordt dat bij een overvolle opvangzak vloeistof in de pomp terecht komt. De aan en uit knop (1). De drukaflezer (6) waarop de ingestelde zuigkracht afgelezen kan worden. De drukregelaar (7) waarmee de zuigkracht ingesteld wordt.

## **Gebruik**

De elektrische pomp wordt aangesloten op een geaard stopcontact. De zuigkracht wordt voor volwassenen ingesteld tussen de **40- 60** cm H<sub>2</sub>O (kinderen tot **20** cm H<sub>2</sub>O). De ingestelde zuigkracht wordt gecontroleerd door deze bij de 'vingertip' af te sluiten en de vacuümdruk te controleren. Hierdoor loopt de wijzer op de meter op. Met de witte draaiknop wordt de zuigkracht bepaald.

## **Reinigen en onderhoud**

De opvangzakken zijn disposable en worden vervangen door een nieuwe als de zak  $\frac{3}{4}$  vol is. Wekelijks dient de verbindingsslang verwijderd te worden en vervangen door een nieuwe. De pomp (kast) kan met een vochtige doek afgenomen worden.

## **Bijzonderheden**

Indien de pomp niet goed zuigt, dient u eerst na te kijken of het deksel de pot goed afsluit en/of de pot niet vol is, waardoor het in het deksel gemonteerde ventiel zuigen onmogelijk maakt. Ook kan het zijn dat de zekering vervangen moet worden. Hiertoe kunt u contact opnemen met de firma Tefa (zie hieronder).

## **Bediening**

- Zet het apparaat aan met aan/uit schakelaar.
- Sluit de afzuigslang aan op het hiervoor bestemde aansluitpunt.
- Sluit de afzuigslang af en controleer de ingestelde vacuümdruk op de **(6)** drukaflezer.
- Gebruik elke uitzuigprocedure een nieuwe steriele uitzuigkatheter.
- Spoel de zuigslang na gebruik door met schoon water.
- Zorg ervoor dat de opvangflacon nooit te vol is, bij  $\frac{3}{4}$  vol → ledigen.

**In geval van een defect uitzuigapparaat kan U contact opnemen met de firma Tefa (telefoon 0348-495700).**

Technisch onderhoud geschiedt jaarlijks door de firma Tefa in opdracht van het Centrum voor Thuisbeademing te Utrecht.